

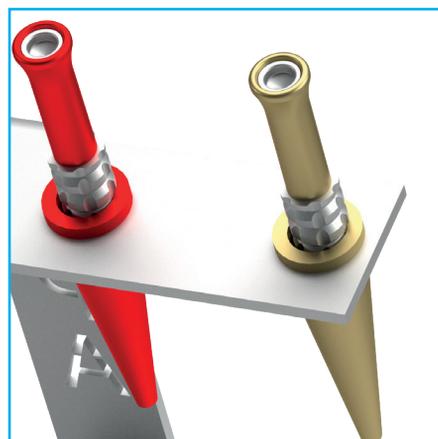
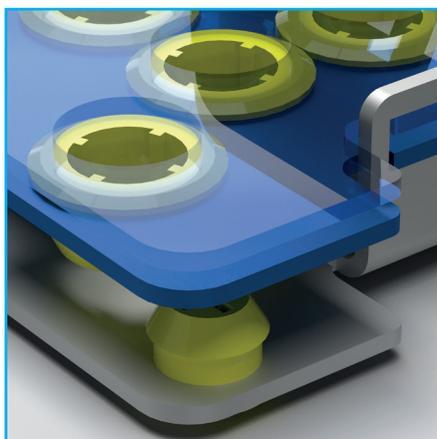
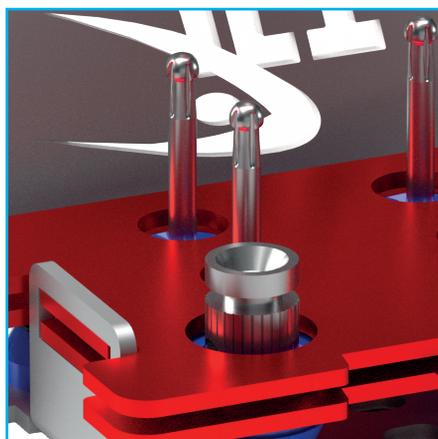
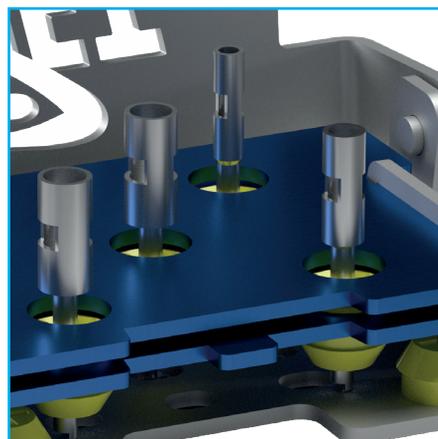
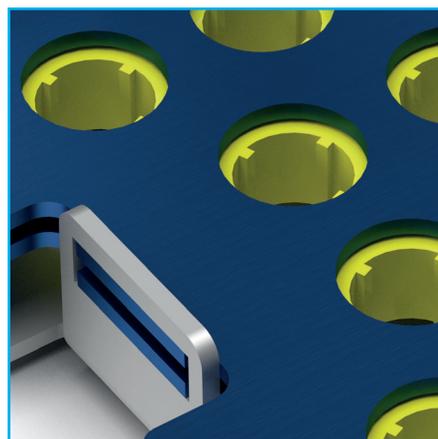


EQUIPARABILI

Tray & strumentario implantologico

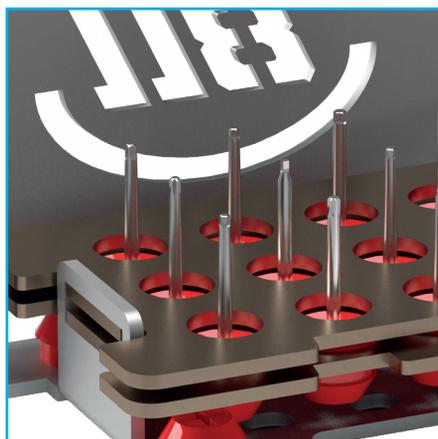

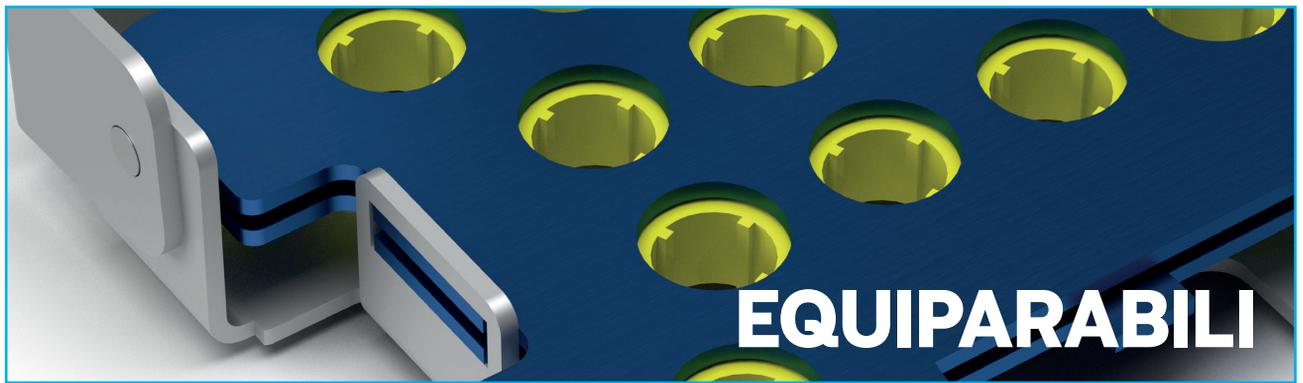



La chirurgia implantoprotesica, negli ultimi anni, ha reso possibile soluzioni riabilitative protesiche fisse che sono diventate essenziali nella pratica quotidiana odontoiatrica.

Anche un odontoiatra oggi, per soddisfare le moderne esigenze del paziente, deve attivarsi professionalmente ed attrezzarsi con adeguati strumenti tecnici per raggiungere tali obiettivi.

Protesica Rimovibile SRL vuole a tal punto, con i suoi kit, mettere a disposizione dell'odontoiatra degli strumenti moderni, che gli permettano risparmio di tempo, ergonomia di lavoro e semplificazione chirurgica.

Le caratteristiche fondamentali dei Kit “equiparabili” di implantologia e chirurgia possono essere così descritte:

- I kit di alluminio anodizzato sono composti da una base ed un coperchio; al suo interno vi sono alloggiati due inserti (chiamati comunemente “vassei”). Uno specificamente dedicato alla procedura chirurgica, ove vi sono descritte le misure dei vari strumenti; il secondo invece è provvisto di gommini ritentivi ed ha la funzione di raccogliere tutti gli strumenti chirurgici scelti dall'operatore.
- Base, coperchio ed i due inserti, sono assemblati tra loro ad incastro. Ciò permette all'operatore una facile detersione, disinfezione, sterilizzazione e riassetto.
- Nei kit equiparabili il punto di prelievo dello strumento è sprovvisto, superficialmente, di gommini od altri elementi ritentivi, così da facilitarne la pulizia e la detersione dopo essere stato contaminato dall'operatore. L'inserto sottostante ove alloggiato i gommini ritentivi è pertanto protetto dall'inserto superiore e quindi lontano dal contatto.
- I kit equiparabili, per il loro particolare design, consentono delle semplici manovre di confezionamento e di sterilizzazione in autoclave a vapore.
- Tutti gli strumenti chirurgici, una volta inseriti nelle apposite sedi, non possono subire spostamenti o ribaltamenti di alcun genere durante la manipolazione.
- I kit equiparabili vengono aperti sul campo operatorio, facilitando l'operatore chirurgo nella scelta e nell'utilizzo degli strumenti (frese ed accessori chirurgici).
- **I kit equiparabili sono protetti da due tipologie di brevetto.**

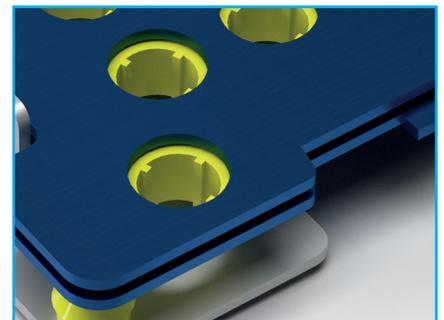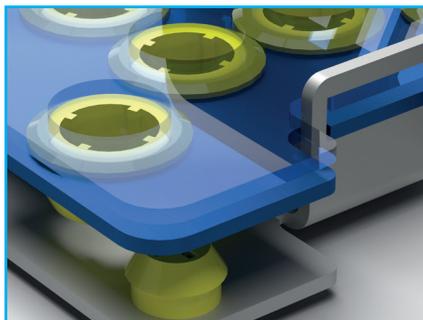

Kit Identikit



KIT Identikit 1

Contenuto

DESCRIZIONE

- 11 Strumenti **Identikit filettati**
- 2 Strumenti **Identikit filettati IMZ®**
- 13 Strumenti **Identikit esagonali**
- 1 Strumento **Identikit quadro**
- 1 Strumento **Identikit ottagonale**

Codice Kit JETID1


KIT Identikit 2

Contenuto

DESCRIZIONE

- 1 Chiave **Torx 5.5**
- 1 Chiave **Torx 6.0**
- 1 Chiave **Esagonale 0.9**
- 1 Chiave **Esagonale 1.15**
- 1 Chiave **Esagonale 1,2**
- 1 Chiave **Esagonale 1.25**
- 1 Chiave **Esagonale 1.3**
- 1 Chiave **Esagonale 1.5**
- 1 Chiave **Esagonale 1.7**
- 1 Chiave **Quadra 0.9**
- 1 Chiave **Taglio 1.6**
- 1 Chiave **Locator**
- 1 Chiave **Equator**
- 1 Chiave **TPA**
- 1 Chiave **Multy Unit**
- 1 **Cricchetto**
- 11 Strumenti **Identikit filettati**
- 2 Strumenti **Identikit filettati IMZ®**
- 13 Strumenti **Identikit esagonali**
- 1 Strumento **Identikit quadro**
- 1 Strumento **Identikit ottagonale**

Codice Kit JETID2

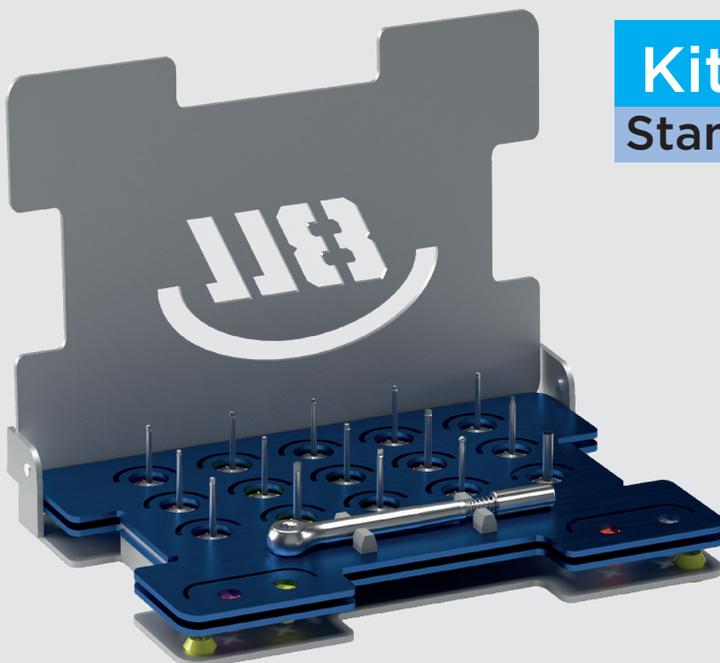


Kit 118 Standard

Contenuto

Il Kit è composto da 15 Cacciaviti

- 01 • Torx 5.5
- 01 • E 0,9
- 01 • E 1,2
- 01 • E 1,3
- 01 • E 1,7
- 01 • T 1,6
- 01 • EQUATOR
- 01 • MUA
- 01 • Torx 6
- 01 • E 1,15
- 01 • E 1,25
- 01 • E 1,5
- 01 • Q 0.9
- 01 • LOCATOR
- 01 • TPA 6

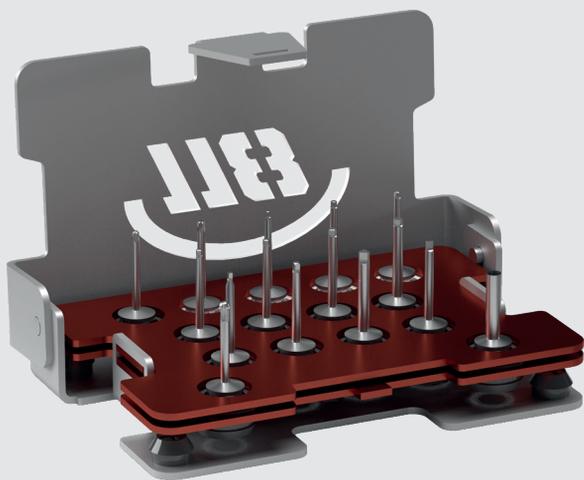


Kit 118

Medium

Contenuto

Il Kit è composto da 15 Cacciaviti

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 • Torx 5,5 | - 1 • Torx 6 |
| 1 • E 0,9 | - 1 • E 1,15 |
| 1 • E 1,2 | - 1 • E 1,25 |
| 1 • E 1,3 | - 1 • E 1,5 |
| 1 • E 1,7 | - 1 • Q 0,9 |
| 1 • T 1,6 | - 1 • LOCATOR |
| 1 • EQUATOR | - 1 • TPA 6 |
| 1 • MUA | |

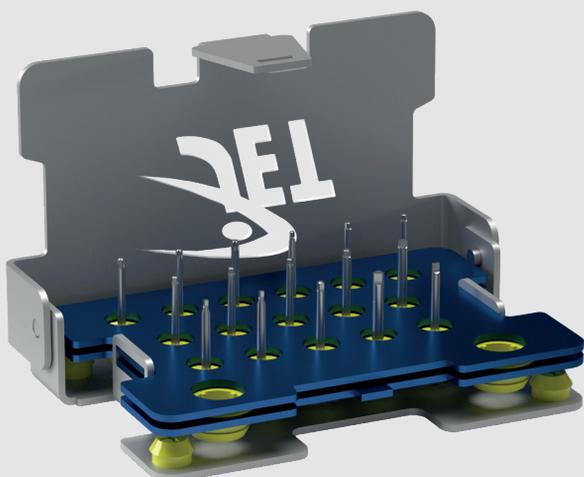


Kit 118 Micromotore

Medium

Contenuto

Il Kit è composto da 16 Cacciaviti

- | | |
|------------|------------------|
| 1 • Torx 4 | - 1 • Tork 5,5 |
| 1 • Tork 6 | - 1 • E 0,9 |
| 1 • E 1,15 | - 1 • E 1,2 |
| 1 • E 1,25 | - 1 • E 1,27 |
| 1 • E 1,3 | - 1 • E 1,5 |
| 1 • E 1,7 | - 1 • Taglio 1,6 |
| 1 • TPA 4 | - 1 • TPA 5 |
| 1 • TPA 6 | - 1 • TPA STR |

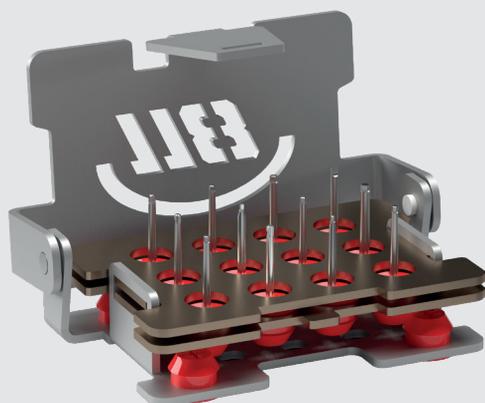


Kit 118 Micromotore

Small

Contenuto

Il Kit è composto da 12 Cacciaviti

- | | |
|------------|------------------|
| 1 • Torx 4 | - 1 • Tork 5,5 |
| 1 • Tork 6 | - 1 • E 0,9 |
| 1 • E 1 | - 1 • E 1,15 |
| 1 • E 1,2 | - 1 • E 1,25 |
| 1 • E 1,3 | - 1 • E 1,5 |
| 1 • E 1,7 | - 1 • Taglio 1,6 |

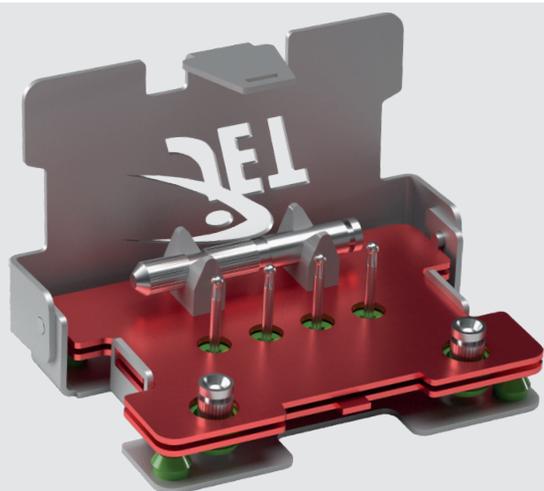


Kit TPA x viti foro angolato micromotore

Medium

Contenuto

Il Kit è composto da:

- 1 manico manuale
- 1 pomello corto manuale
- 1 cacciavite TPA 4 lobi
- 1 cacciavite TPA 5 lobi
- 1 cacciavite TPA 6 lobi
- 1 TPA tipo Straumann®

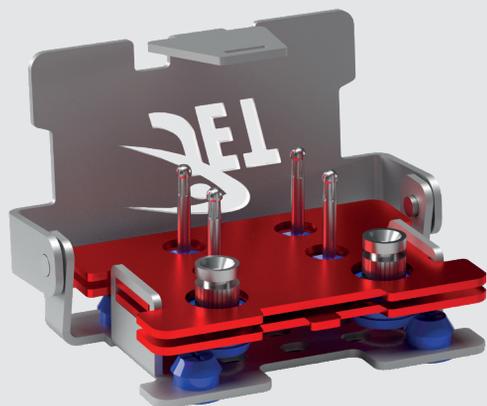


Kit TPA x viti foro angolato micromotore

Small

Contenuto

Il Kit è composto da:

- 1 cacciavite 6 lobi
- 1 cacciavite 5 lobi
- 1 cacciavite 4 lobi
- 1 cacciavite esagonale str

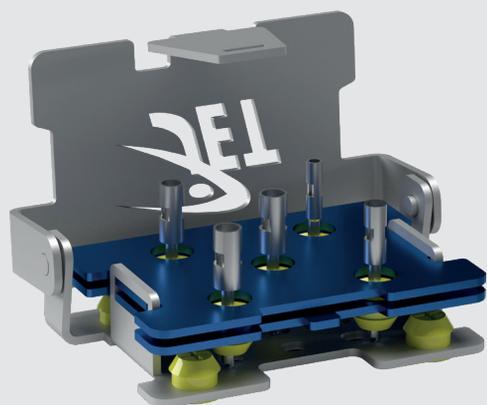

Kit Mucotomi

Small

Contenuto

Il Kit è composto da 5 Mucotomi

- Mucotomo Ø 3mm
- Mucotomo Ø 4mm
- Mucotomo Ø 4,5mm
- Mucotomo Ø 5mm
- Mucotomo Ø 5.5mm




Kit Estrattori

Medium

Contenuto

Il Kit è composto da:

- 1 cricchetto
(chiave dinamometrica)
- 4 estrattori
(2 viti passanti
con esagono usurato;
2 per impianti fratturati)

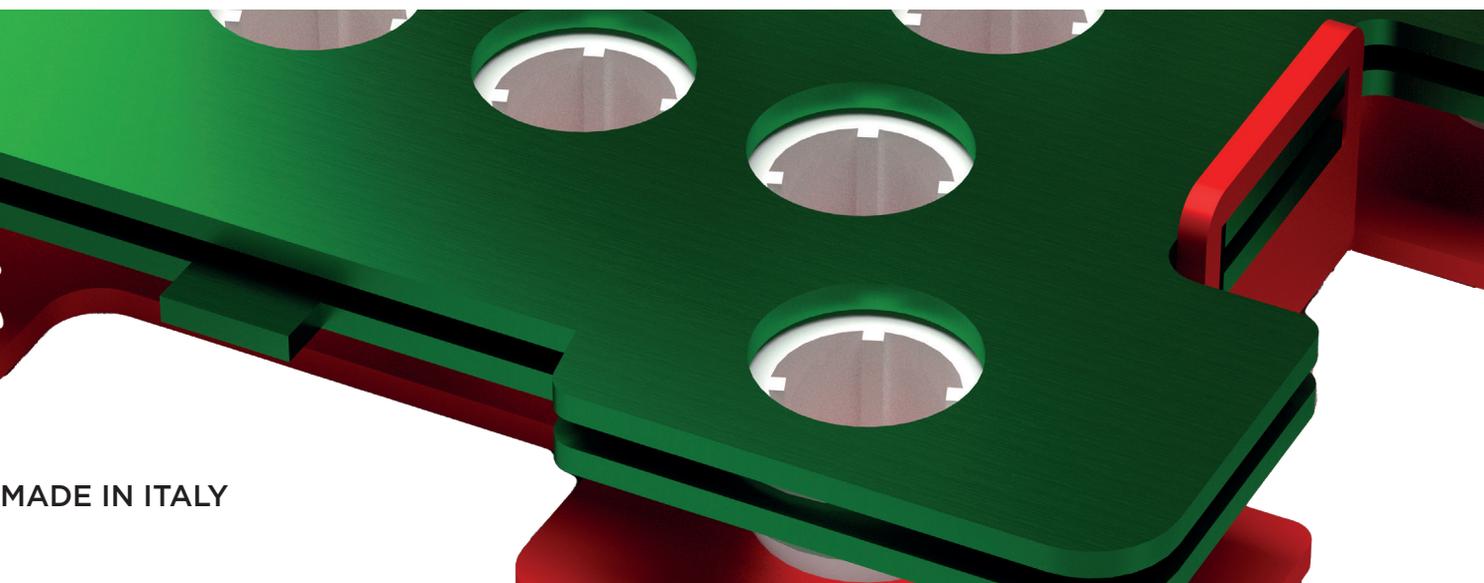

Kit Cacciaviti per laboratorio

Standard




Contenuto

Il Kit è composto da 6 cacciaviti:

Torx 5,5
Torx 6
E 1,2
E 1,25
1 EQUATOR
1 LOCATOR

Kit Cacciaviti per laboratorio TPA

Medium

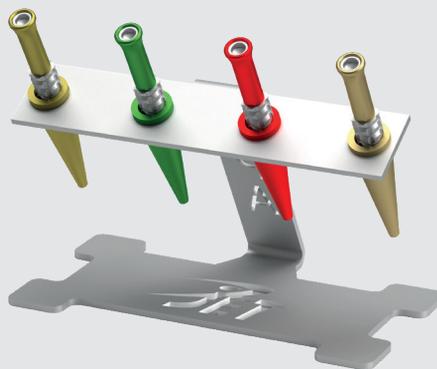


Contenuto

Il Kit è composto da 4 cacciaviti:

TPA 4 LOBI
TPA 5 LOBI
TPA 6 LOBI
TPA STR

Kit Cacciaviti per laboratorio

Medium

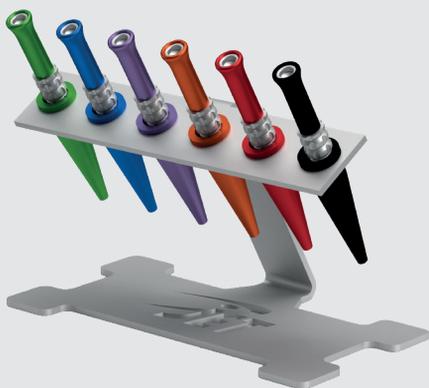


Contenuto

Il Kit è composto da 6 cacciaviti:

Torx 5,5
Torx 6
E 1,2
E 1,25
1 EQUATOR
1 LOCATOR

Kit Cacciaviti per laboratorio TPA

Small

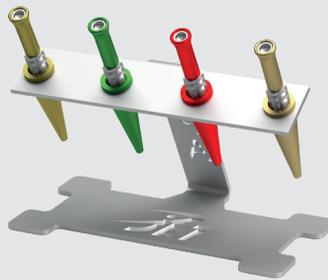

Contenuto

Il Kit è composto da 4 cacciaviti:

TPA 4 LOBI
TPA 5 LOBI
TPA 6 LOBI
TPA STR

Kit Cacciaviti per laboratorio

Small



Contenuto

Il Kit è composto da 6 cacciaviti:

Torx 5,5
Torx 6
E 1,2
E 1,25
1 EQUATOR
1 LOCATOR



JETIMPLANT S.r.l.

Via privata Emilia Romagna, 13/15
26855 Lodi Vecchio (LO) ITALIA

Telefono (+39) 0371 46.03.02
WhatsApp (+39) 351 46.14.739

www.jetimplant.com

jetimplantsrl@gmail.com